


Auswahl der richtigen Größe der Manschetten und der Elektrodenposition



Die Manschetten sind in drei Größen erhältlich:
Small, Medium und Large.


1

Messen Sie Ihren Hüftumfang an der breitesten Stellen, wie es hier abgebildet ist.

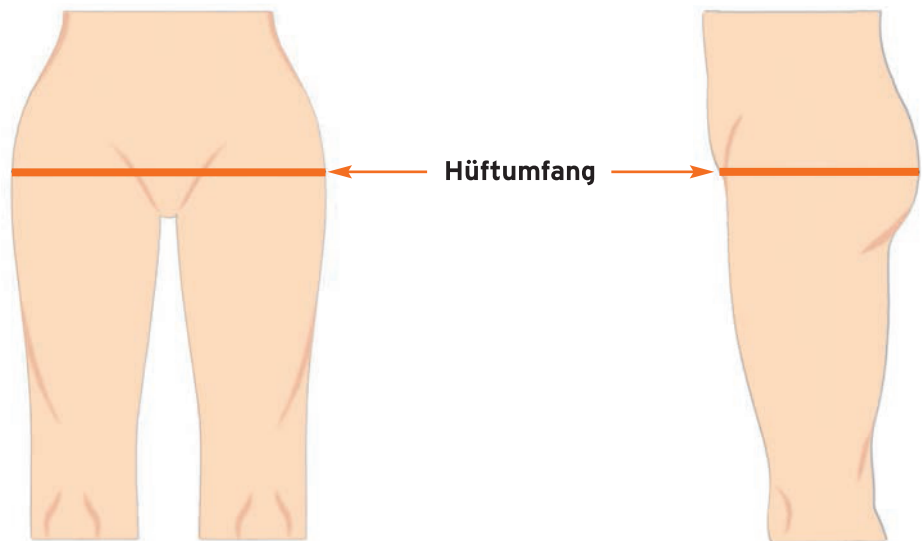

2

Verwenden Sie diese Tabelle zur richtigen Auswahl der Manschettengröße und der Elektrodenposition A oder B.

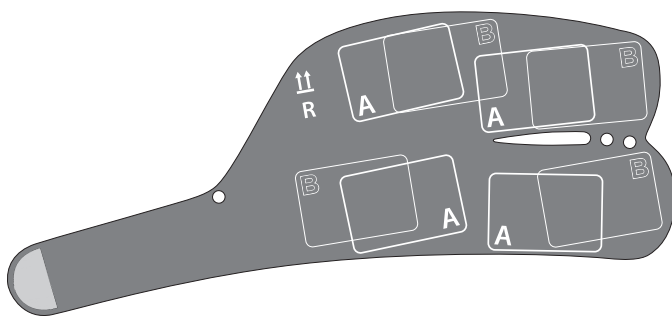

GRÖßENTABELLE

Hüftumfang	Größe A or B
86.3-97.5cm	S A
97.6-107.7cm	S B
107.9-116.6cm	M A
116.8-121.7cm	M B
121.9-124.6cm	L A
124.7-127cm	L B

Bitte lesen Sie nun die ausführliche Gebrauchsanweisung und die Kurzanleitung. Das Anleitungsvideo finden Sie unter www.neurotech-vital.de

BMR Health GmbH
In Oberwiesen 9
88682 Salem
Telefon +49 7553 590990-0
Telefax +49 7553 590990-50
E-Mail info@bmrh.de
Web www.bmr-health.de